


COOK®
MEDICAL

Fusion LoopTip

ПРОВОДНИК

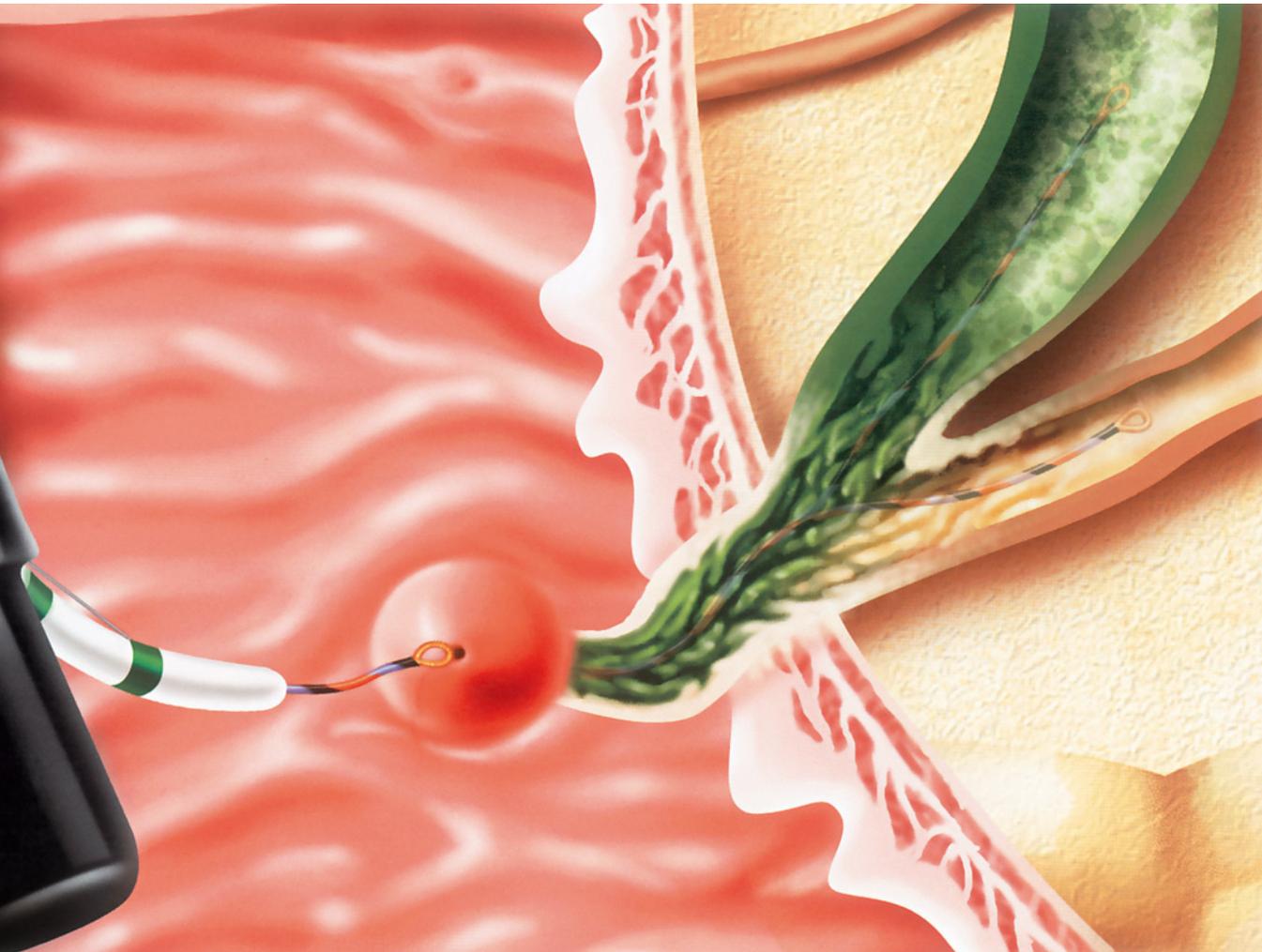

Новые возможности проводниковой канюляции

Каждый врач – эндоскопист в ряде случаев сталкивается с трудностями при проведении Э.Р.Х.П.Г. и ПСТ. Проводник Fusion LoopTip сконструирован таким образом, чтобы во время канюляции проникать в панкреато-билиарную протоковую систему с наименьшими травмами.

Приобретайте новый проводник с петлей и почувствуйте новые возможности!



Fusion LoopTip

ПРОВОДНИК

Используется при канюляции билиарных и панкреатических протоков и легко проникает через извилистые стриктуры при проведении Э.Р.Х.П.Г.

- Петля на дистальном кончике проводника обеспечивает менее травматичный доступ и прохождение выраженных панкреато-билиарных стриктур
- Рентгеноконтрастная петля обеспечивает превосходную визуализацию
- Благодаря разметке на дистальном кончике проводника можно хорошо наблюдать продвижение проводника под эндоскопическим контролем
- Нитиноловый сердечник предохраняет проводник от перекручивания и способствует сохранению формы

Каталожный номер	Диаметр проводника	Длина проводника	Размер петли
FS-LT-35-205	.035"	205 см	2x4 см
FS-LT-35-260	.035"	260 см	2x4 см
FS-LT-35-205	.035"	480 см	2x4 см

Проводник может быть оставлен в протоках при проведении ПСТ. Внимание: проводник нельзя использовать с инструментарием, имеющим металлический кончик.



www.cookmedical.com

Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345 18 59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by